

สารบัญ

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ์	7.3 การใช้งานปั้มน้ำนม
2. ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์	7.4 การใช้มือปั้ม
3. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	7.5 การเก็บน้ำนม
4. ข้อสังเกต	7.6 การให้นมด้วยนม
5. คำอธิบายอุปกรณ์	8. ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
6. การตั้งค่าเริ่มต้น	8.1 อะไหล่และชิ้นส่วนรวมใส่
6.1 วิธีประกอบเครื่องปั้มนม	9. คำแนะนำการกำจัด
6.2 การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ปั้มนม	10. ข้อมูลทางเทคนิค
7. การใช้งาน	11. ส่วนสำคัญ
7.1 คำแนะนำสำหรับการไหลของน้ำนมที่ดีขึ้น	
7.2 วิธีการใช้งานปั้มน้ำนม	อะไหล่และชิ้นส่วนรวมใส่

สิ่งที่อยู่ในการจัดส่ง

- เครื่องปั้มนมไฟฟ้าแบบคู้ (ชุดมอเตอร์)
- ท่อซิลิโคนพร้อมตัวต่อสำหรับการปั้มสองด้าน
- ท่อซิลิโคนสำหรับการปั้มด้านเดียว
- ตัวยึดปั้ม 2x พร้อมกับเมมเบรนซิลิโคนและวาล์วซิลิโคน
- เบาะซิลิโคน 2x (ขนาดปกติ)
- 2x ชุด
- ฝาขวด 2x
- จุกนมซิลิโคน
- ฝาขวดสำหรับจุกนมซิลิโคน
- ปั้มด้วยตนเอง
- ที่วางขวดเล็ก 2 อัน
- อะแดปเตอร์ 2x สำหรับขวด Avent และ NUK
- ถุงเก็บ
- ปลั๊กไฟหลัก
- 4x AA แบตเตอรี่
- คำแนะนำเหล่านี้สำหรับการใช้งาน

เรียนคุณลูกค้า

ขอขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรามีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์ของเราถูกทดลองแล้วเพื่อการใช้ที่เกี่ยวกับ ความอบอุ่น, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของร่างกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนูนมวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอ่านคู่มือการใช้เพื่อการใช้อย่างปลอดภัยและเก็บไว้เพื่อการใช้ต่อไป และโปรดเก็บคู่มือไว้ในที่ที่ผู้ใช้นั้นจะหยิบมาอ่านได้ง่าย

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร์

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้ สามารถพบได้ในคู่มือการใช้งานและบนอุปกรณ์

	คำเตือน คำแนะนำนี้เพื่อเตือนว่าอุปกรณ์อาจเสี่ยงต่อสุขภาพหรือความบาดเจ็บได้
	สำคัญ คำแนะนำนี้ด้านความปลอดภัยเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะทำลายอุปกรณ์/ชิ้นส่วน
	ข้อสังเกต สิ่งเดรยละเอียดสำคัญ
	อ่านคู่มือก่อนใช้งาน
	ความปลอดภัยทางไฟฟ้าชนิด BF
	ประโยชน์โดยตรง

คู่มือการใช้งาน เครื่องปั้มนม Model no: BY70

	ทำการกำจัดตามข้อกำหนด EC Directive-WEEE (Wasve Electrical and Electronic Equipment)
	ผู้ผลิต
	อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บ
	อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
IP 21	ทำการกำจัดตามข้อกำหนด EC Directive-WEEE (Wasve Electrical and Electronic Equipment)
	บรรจุภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสัมผัสอาหารได้ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ (EC) ที่1935/2004
SN	รหัสสินค้า
	เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิตภัณฑ์ว่าผ่านคุณสมบัติเครื่องมือการแพทย์ของ Directive 93/42/EEC
REF	เลขสมุดแจ้งรายการสินค้า (แค็ตตาล็อก) ของผู้ผลิต
	ตัวเครื่องนั้นถูกป้องกัน 2 ชั้นและเกี่ยวข้องกับการป้องกันระดับ 2
	เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์

เครื่องปั้มน้ำนม บอยเลอร์ BY70 ผลิตออกมาเพื่อให้คุณแม่ลูกอ่อนปั้มน้ำนมได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งการที่คุณแม่ลูกอ่อนนั้นไม่สามารถรีดน้ำนมออกจากอกได้มากเพียงพออาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดการการสะสมของน้ำนมในหน้าอกที่มากเกินไป กรณีที่เลวร้ายที่สุดจากการมีน้ำนมสะสมมากเกินไปคืออาจก่อให้เกิดการอักเสบของหัวนมได้ (โรคเต้านมอักเสบ) โดยการป้องกันนั้นคือการให้น้ำนมที่การถ่ายเท ซึ่งเครื่องปั้มนมก็สามารถช่วยท่านได้นอกเหนือจากนั้น เครื่องปั้มนมยังสามารถช่วยบรรเทาอาการเจ็บที่หัวนมหรือหัวนมแตกได้ท่านยังสามารถใช้โหมคกระตุ้นของเครื่องปั้มนมในการช่วยดึงหัวนมสั้นหรือบอดให้อยู่ในลักษณะปกติได้ซึ่งจะทำให้ง่ายขึ้นในการปั้มน้ำนม เครื่องปั้มน้ำนมนี้สามารถให้ท่านเก็บน้ำนมไว้ในขวดได้ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางหรือต้องอยู่ห่างบุตรของท่าน

3. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

วัตถุประสงค์ในการใช้งานของเครื่องปั้มน้ำนมเพื่อปั้มน้ำนมคุณแม่ลูกอ่อนเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ใช้กับสัตว์หรือเชิงพาณิชย์ และควรใช้ภายในบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้น เครื่องมือนี้นควรถูกใช้สำหรับการปั้มน้ำนมตามคู่มือนี้ได้กล่าวไว้เท่านั้น ทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบหากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับบาดเจ็บจากการไม่ดูแลและใช้เครื่องมืออย่างไม่เหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทได้แจ้งเตือนเบื้องต้นไว้ในคู่มือนี้ไว้แล้ว

4. ข้อสังเกตสำคัญ

คำเตือน

คำแนะนำในการใช้

- เก็บเครื่องมือหรืออุปกรณ์ให้ห่างจากมือเด็กเพื่อป้องกันอันตรายจากการสำลักติดคอ
- เก็บชิ้นส่วนเล็กๆ ให้พ้นจากมือเด็ก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่สามารถเล่นกับสายเชื่อมต่อ
- ใช้ปลั๊กไฟที่มาพร้อมตัวเครื่องเท่านั้น
- ห้ามเด็กเล่นกับตัวเครื่อง
- ห้ามให้เด็กใช้หรือทำความสะอาดตัวเครื่อง เว้นเสียแต่อยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่
- ห้ามอง, บิด, หรือดึงปลั๊กหลัก
- ก่อนที่จะใช้เครื่องปั้มน้ำนมเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนประกอบกันถูกต้อง
- กรุณาดึงปลั๊กหลักออกจากตัวเครื่องหากเครื่องมีปัญหา, ตอนทำความสะอาด, หรือระหว่างที่เครื่องไม่ถูกใช้งาน
- ห้ามให้เครื่องปั้มน้ำนมสัมผัสความร้อนหรือสิ่งแหลมคม
- ห้ามใช้ชิ้นส่วนเพิ่มเติมหากทางบอยเลอร์ไทยไม่ได้แนะนำหรือมอบให้
- เพื่อความสะอาด เครื่องปั้มน้ำนมควรใช้คนเดียว กรุณาอย่าใช้เครื่องปั้มน้ำมนนี้กับแม่ลูกอ่อนคนอื่น

- เครื่องปั้มนมต้องใช้ใช้กับเต้านมเพศหญิงเท่านั้น
- ห้ามใช้ที่เครื่องปั้มน้ำนมถ้ารู้สึกง่วงนอนหรือนอนหลับ
- ระหว่างการใช้งานในโหมดปั้มคู้“ 2” โปรดเชื่อมต่อท่อเข้ากับอะแดปเตอร์สำหรับ 2 ขวดขนาดเล็ก
- ห้ามใช้เครื่องปั้มน้ำนมขณะอาบน้ำ
- ในกรณีที่มีปัญหา ห้ามเปิดและเขย่าเครื่องปั้ไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม “หากมีปัญหากฎณาติดต่อทางทีมงานบอยเลอร์ไทยหรือตัวแทนจำหน่าย”
- หากมีปัญหา ควรส่งเครื่องมือให้ทางทีมงานบอยเลอร์ไทยแก้เท่านั้น ไม่ควรซ่อมแซมเครื่องปั้มน้ำมนนี้ด้วยตัวเองเนื่องจากจะทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลง
- ห้ามจุ่มเครื่องปั้มนมลงน้ำเปอนอันเด็ดขาด
- ห้ามจับเครื่องปั้มน้ำนมหากมือของท่านชื้นหรือเปียก
- ห้ามยื่นมือไปเก็บเครื่องปั้มนมหากตัวเครื่องได้ตกน้ำไปแล้วและให้ถอดปลั๊กทันที
- โปรดวางเครื่องปั้มน้ำนมไว้บนที่ราบและมั่นคงในขณะที่การใช้งาน
- คลี่สายไฟหลักจนให้สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไป
- ห้ามวางที่ปั้มนมหรือปลั๊กไฟหลักในไมโครเวฟ
- ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากช็อกเก็ตเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องปั้มนม อย่าเสียบปลั๊กเครื่องปั้มนมไว้
- หากสายไฟหลักของเครื่องปั้มน้ำนมชำรุดให้ทิ้งทันที
- ห้ามอุ่นนมในไมโครเวฟเนื่องจากอาจอุ่นไม่สม่ำเสมอและอาจทำให้ลูกของคุณไหม้เมื่อดื่ม
- เก็บสายไฟหลักให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
- อุปกรณ์นี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีร่างกายหรือสภาวะจิตใจผิดปกติ รวมถึงคนที่ไม่รู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นด้วย เพราะฉะนั้นหากผู้ใช้ที่มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมา ความมีบุคคลที่เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ใช้อยู่ ณ ที่นั้นด้วย
- ท่านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสอบเทียบเครื่องปั้มน้ำนม
- ห้ามทำการแก้ไขอุปกรณ์

สำคัญ

- ห้ามใช้น้ำทำให้ตัวปั้มชุ่มชื้นด้วย เนื่องจากพื้นผิวของตัวปั้มนั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำหรือของเหลวอื่นๆได้
- ห้ามให้เครื่องมืออยู่ในที่ที่มีแรงไฟฟ้าสถิต เนื่องจากแรงไฟฟ้าสถิตอาจทำให้เครื่องมือมีปัญหาได้
- โปรดป้องกันไม่ให้เครื่องปั้มน้ำนมอยู่ในสถานที่ที่มีแสงแดด, ความร้อน, ความชื้น, หรือสารปนเปื้อนจะสามารถสัมผัสกับตัวเครื่องได้โดยตรง
- ห้ามดึงท่อปั้มน้ำนม
- ห้ามดึงสายปลั๊กหากต้องการที่จะดึงตัวปลั๊กออกจากเครื่อง

สำคัญ

คำแนะนำสำหรับการพกขาดนม

- ครอบขาดนมด้วยฝาทุกครั้งขณะเดินทาง
- ไม่แนะนำให้ใส่ขาดนมที่ยังมีน้ำนมเต็มอยู่ลงในกระเป๋าหรือกระเป๋าเดินทาง

คำเตือน

ความปลอดภัยของเด็ก

- ใช้สินค้าภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่เท่านั้น
- การดูดของเหลวนานจนเกินไปอาจทำให้ฟันสึกหรอได้
- ห้ามใช้จุกขาดนมแทนจุกนมปลอมสำหรับเด็กเป็นอันตราย
- ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนรับประทานเสมอ
- ควรตรวจสอบจุกนมทุกครั้งก่อนใช้โดยการดึงจุกนมไปมาให้ทั่วทุกทิศและหากเจอความผิดปกติหรือความเสียหายใดใด โปรดทิ้งจุกนมนี้จนกว่าจะเปลี่ยน
- อย่าทิ้งจุกนมไว้ในที่ที่สามารถสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือทิ้งไว้ในสารฆ่าเชื้อโรคนานจนเกินไปอาจทำลายคุณภาพของจุกนมได้
- อย่าให้หัวนมถูกแสงแดดโดยตรงหรือแหล่งความร้อนและอย่าทิ้งน้ำยาฆ่าเชื้อ (“สารละลายฆ่าเชื้อ”) นานกว่าที่แนะนำเพราะอาจทำให้จุกนมเสียหายได้
- อย่าจุ่มจุกนมไปในสารที่ให้ความหวานเนื่องจากอาจทำให้เด็กฟันผุได้
- ห้ามใช้ตัวทำลายหรือสารขัดในการทำความสะอาด
- แนะนำให้ท่านนำอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสกับน้ำนมแช่น้ำร้อนประมาณ 5 นาที ก่อนใช้ทุกครั้งเพื่อสุขภาพ


- ทำความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเหลวในขวดนมไม่มีอุณหภูมิเกิน 50 ° C

 คำเตือน

การจัดการแบตเตอรี่


- หากมีของเหลวจากตัวถ่านโดนผิวหนังหรือตของท่าน กรุณารับใช้น้ำล้างบริเวณที่โดนของเหลวโดยทันทีและเข้าพบแพทย์หากรู้สึกผิดปกติ
- ⚠อันตรายจากการหายใจไม่ออก! เด็กเล็กอาจกลืนหรือถ่านติดคอได้ เพราะฉะนั้น กรุณาเก็บถ่านไว้ในที่ที่ไกลมือเด็กเล็ก
- สังเกตขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของถ่าน
- หากรู้สึกถึงการรั่วไหลของถ่าน ให้ท่านใส่ถุงมือป้องกันและทำความสะอาดส่วนที่ไหลออกมาด้วยผ้าแห้ง
- ป้องกันแบตเตอรี่จากความร้อนสูง
- ⚠เสียงต่อระเบิด: ห้ามโยนถ่านลงในกองไฟไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม
- อย่าชาร์จหรือให้ไฟฟ้ารั่ววงจร
- หากไม่ควรใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานาน ให้นำแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่
- ควรใช้ถ่านรุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงเท่านั้น
- เปลี่ยนถ่านใหม่พร้อมๆกันทุกครั้ง
- อย่าใช้แบตเตอรี่ชาร์จไฟ
- อย่าทำการแยกชิ้นส่วนถ่านหรือบดถ่าน

5. คำอธิบายอุปกรณ์

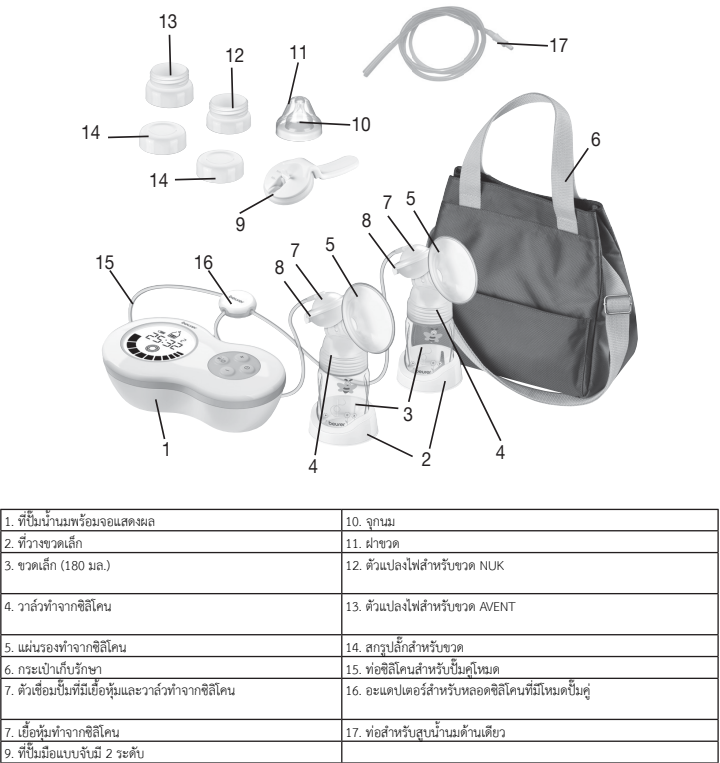

1. ที่ปั้มน้ำนมพร้อมจอแสดงผล	10. จุกนม
2. ที่วางขวดเล็ก	11. ผาขวด
3. ขวดเล็ก (180 มล.)	12. ตัวแปลงไฟสำหรับขวด NUK
4. วาล์วท่จากซิลิโคน	13. ตัวแปลงไฟสำหรับขวด AVENT
5. แผ่นรองทำจากซิลิโคน	14. สกรูล็อกสำหรับขวด
6. กระเป๋ากับรักษา	15. ท่อซิลิโคนสำหรับปั้มคูโหนด
7. ตัวเชื่อมปั้มที่มีเออร์และวาล์วทำจากซิลิโคน	16. อะแดปเตอร์สำหรับหลอดซิลิโคนที่มีโหนดปั้มคู่
7. เออร์ท่ทำจากซิลิโคน	17. ท่อสำหรับสูบน้ำนมด้านเดียว
9. ที่ปั้มน้ำนมแบบจัมปี 2 ระดับ	

สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล

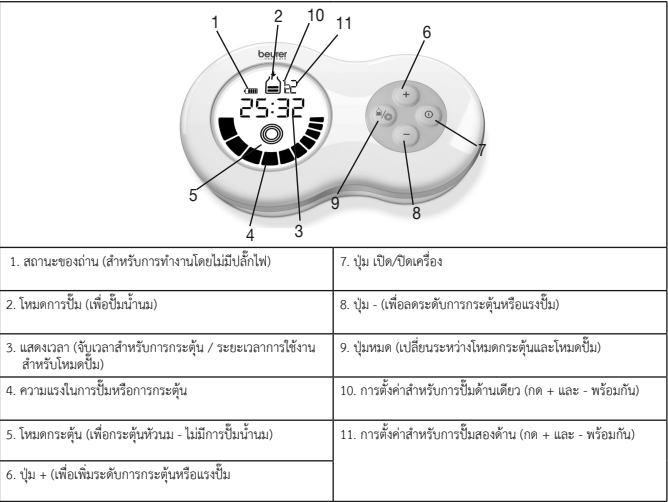

1. สถานะของถ่าน (สำหรับการทำงานโดยไม่มีปลั๊กไฟ)	7. ปุ่ม เปิด/ปิดเครื่อง
2. โหมดการปั้ม (เพื่อปั้มน้ำนม)	8. ปุ่ม - (เพื่อลดระดับการกระตุ้นหรือแรงปั้ม)
3. แสดงเวลา (จับเวลาสำหรับการกระตุ้น / ระยะเวลาการใช้งานสำหรับโหมดปั้ม)	9. ปุ่มหมด (เปลี่ยนระหว่างโหมดกระตุ้นและโหมดปั้ม)
4. ความแรงในการปั้มหรือการกระตุ้น	10. การตั้งค่าสำหรับการปั้มน้ำนมด้านเดียว (กด + และ - พร้อมกัน)
5. โหมดกระตุ้น (เพื่อกระตุ้นหัวนม - ไม่มีการปั้มน้ำนม)	11. การตั้งค่าสำหรับการปั้มน้ำนมด้าน (กด + และ - พร้อมกัน)
6. ปุ่ม + (เพื่อเพิ่มระดับการกระตุ้นหรือแรงปั้ม)	


6. การตั้งค่าเริ่มต้น

 ข้อสังเกต

ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์ของเครื่องปั้มน้ำนมมีทุกอย่างครบถ้วนและไม่ได้เสียหายก่อนใช้งาน คุณลูกค้าโปรดตรวจสอบตัวเครื่องปั้มและชิ้นส่วนเพิ่มเติมว่าไม่ได้มีความเสียหายที่เห็นได้ชัดหรือมีส่วนประกอบของเครื่องขาดหาย และหากท่านมีข้อสงสัย กรุณาอย่าเพิ่งเปิดใช้อุปกรณ์และติดต่อผู้ที่ขายสินค้าให้ท่านหรือทางทีมงานบอยเลอรี่ไทยเสียก่อน

6.1 วิธีประกอบเครื่องปั้มนม

หลังจากที่ท่านนำผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว โปรดตรวจสอบภาชนะพลาสติกว่ามีรอยแตกที่ใด หรือไม่มีเพื่อที่จะได้แน่ใจว่าส่วนที่ประกอบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่โดนของเหลวโดยไม่มีกรป้องกัน

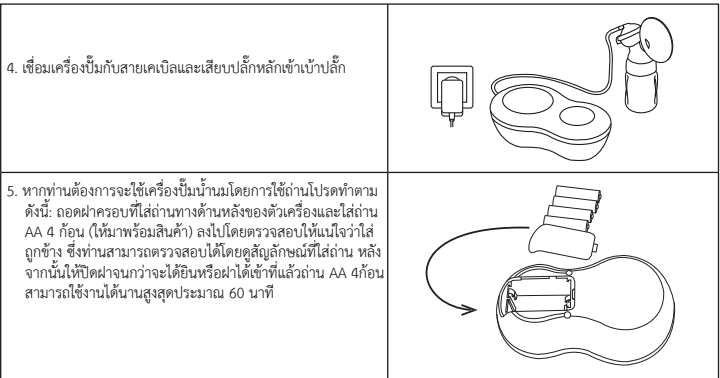

6.2 วิธีทำความสะอาดตัวเครื่องปั้มน้ำนม

 สำคัญ

ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อชิ้นส่วนแยกต่างหากของปั้มน้ำนมที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำนมแม่ (ยกเว้นชุดมอเตอร์และท่อซิลิโคน) ที่ละชิ้นก่อนใช้งานครั้งแรกและการใช้งานอื่น ๆ ห้ามทำหมันชุดมอเตอร์ เพื่อฆ่าเชื้อที่ปั้มนมอย่างถูกต้อง

1. คลายสกรูยึดปั้มออกจากขวด
2. ถอดท่อซิลิโคนออกจากตัวยึดปั้มและชุดมอเตอร์
3. ถอดซิลิโคนเมมเบรนและวาล์วซิลิโคนออกจากตัวยึดปั้ม
4. ฆ่าเชื้อขวดและอุปกรณ์ติดตั้งปั้ม (ด้วยซิลิโคนเมมเบรนและวาล์วซิลิโคน) เป็นเวลานานในน้ำเดือดหรือใช้เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ อย่าใช้ที่ปั้มน้ำนมจนกว่าชิ้นส่วนทั้งหมดจะแห้งสนิท อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้านเชื้อแบคทีเรียใด ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับพลาสติกบนที่ปั้มน้ำนม
5. ทำความสะอาดชุดมอเตอร์อย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ อย่าใช้สารทำความสะอาดไม่ครีโอลมมอเตอร์ไว้ได้น้ำเพราะอาจทำให้เกิดของเหลวเข้าและทำให้ปั้มน้ำนมเกิดความเสียหาย หากคุณไม่ต้องการใช้ที่ปั้มนมเป็นเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่ออก

7. การใช้งาน

7.1 คำแนะนำสำหรับการไหลของน้ำนมที่ดีขึ้น

- เลือกสถานที่ที่จะใช้ปั้มน้ำนมที่คุณสามารถผ่อนคลาย
- เลือกเวลาที่จะใช้ปั้มน้ำนมเมื่อคุณสามารถผ่อนคลาย
- การมีลูกของคุณอยู่ใกล้ ๆ หรือดูรูปลูกของคุณอาจส่งผลต่อการไหลของน้ำนม
- หากเลี้ยงลูกโดยใช้เต้านมข้างเดียวให้ใช้ที่ปั้มน้ำนมที่ออกอีกข้างพร้อมกัน
- ความอบอุ่นและผ่อนคลายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนม ใช้ที่ปั้มน้ำนมหลังจากอาบน้ำหรืออาบน้ำ
- หากทรงอกบวมหรือเจ็บให้วางผ้าเช็ดตัวอุ่นไว้สักครู่ สิ่งนี้จะปรับปรุงการไหลของน้ำนม
- หากน้ำนมไม่เริ่มไหลออกมาจากเต้านมของคุณทันทีให้ลองผ่อนคลายแล้วลองอีกครั้งหลังจากนั้นสองสามนาที่
- หากที่ปั้มน้ำนมยังไม่สัคดีน้ำนมออกจากเต้านมหลังจากผ่านไปห้านาทีให้หยุดใช้แล้วลองอีกครั้งในภายหลัง
- หากคุณมีอาการปวดแหลมคมใด ๆ เมื่อใช้ที่ปั้มน้ำนมให้ปรึกษาแพทย์

7.2 วิธีใช้งานเครื่องปั้มนม (สำหรับการปั้มน้ำนมสองข้าง)



2. ใส่ปลายท่อซิลิโคนสำหรับการปั๊มสองด้านเข้ากับตัวเชื่อมปั๊มและเครื่องปั๊ม	
3. นั้งและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ท่านสามารถใช้หมอนในการช่วยการค้ำหลังได้	
4. นาบแผ่นรองซิลิโคนลงบนหน้าอกเบาๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวนมของท่านเปิดสนิทและไม่มีฟองอากาศอยู่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันหน้าอกควรกดลงกับหน้าอกอย่างเบบสนิท	
5. กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่องปั๊มน้ำนม เครื่องปั๊มจะเริ่มอยู่ที่โหมดระดับ โดยอัตโนมัติหน้าจอจะแสดงการจับเวลา 2 นาที ซึ่งในเวลา 2 นาที หัวนมของท่านจะถูกกระตุ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปั๊มน้ำนม กดปุ่ม / เพื่อเลือกความแรงในการกระตุ้น	
6. หลังจาก 2 นาทีผ่านไปแล้วสัญลักษณ์ จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ โปรดกดปุ่ม เพื่อเริ่มการปั๊มน้ำนม และกดปุ่ม / เพื่อเลือกความแรงในการปั๊มที่เหมาะสมสำหรับท่าน และเมื่อน้ำนมของท่านเต็มขวดครบ 180 ml โปรดหยุดการปั๊ม	
7. กดปุ่ม หากท่านต้องการจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดกระตุ้น และการจับเวลา 2 นาทีจะเริ่มนับใหม่อีกครั้ง เครื่องปั๊มน้ำนมนี้มีความสามารถในการบันทึกความแรงในการปั๊มหรือการกระตุ้นจากครั้งล่าสุดที่ใช้ได้	
8. กดปุ่ม เพื่อปิดเครื่องปั๊มน้ำนม	

7.3 วิธีใช้งานเครื่องปั๊มนม (สำหรับการปั๊มข้างเดียว)

1. ก่อนใช้เครื่องปั๊มน้ำนม โปรดล้างมือและหน้าอกของท่านให้สะอาด	
2. ใส่ปลายท่อซิลิโคนสำหรับการปั๊มสองด้านเข้ากับตัวเชื่อมปั๊มและเครื่องปั๊ม	

3. นั้งและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ท่านสามารถใช้หมอนในการช่วยการค้ำหลังได้	
4. นาบแผ่นรองซิลิโคนลงบนหน้าอกเบาๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวนมของท่านเปิดสนิทและไม่มีฟองอากาศอยู่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันหน้าอกควรกดลงกับหน้าอกอย่างเบบสนิท	
5. กดปุ่ม เพื่อเปิดเครื่องปั๊มน้ำนม เครื่องปั๊มจะเริ่มอยู่ที่โหมดระดับ โดยอัตโนมัติหน้าจอจะแสดงการจับเวลา 2 นาที ซึ่งในเวลา 2 นาที หัวนมของท่านจะถูกกระตุ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปั๊มน้ำนม กดปุ่ม / เพื่อเลือกความแรงในการกระตุ้น	
6. หลังจาก 2 นาทีผ่านไปแล้วสัญลักษณ์ จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ โปรดกดปุ่ม เพื่อเริ่มการปั๊มน้ำนม และกดปุ่ม / เพื่อเลือกความแรงในการปั๊มที่เหมาะสมสำหรับท่าน และเมื่อน้ำนมของท่านเต็มขวดครบ 180 ml โปรดหยุดการปั๊ม	
7. กดปุ่ม หากท่านต้องการจะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดกระตุ้น การกระตุ้นและการจับเวลา 2 นาทีจะเริ่มนับใหม่อีกครั้ง เครื่องปั๊มน้ำนมนี้มีความสามารถในการบันทึกความแรงในการปั๊มหรือการกระตุ้นจากครั้งล่าสุดที่ใช้ได้	
8. กดปุ่ม เพื่อปิดเครื่องปั๊มน้ำนม	

7.4 วิธีการใช้มือปั๊ม

1. ถอดฝาปิดที่เชื่อมตัวปั๊มนมและต่ออุปกรณ์ที่ปั๊มน้ำนมแบบจับรวมถึงเมมเบรนซิลิโคน โดยกดให้แน่นลงอุปกรณ์	
2. นาบแผ่นรองซิลิโคนลงบนหน้าอกเบาๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวนมของท่านเปิดสนิทและไม่มีฟองอากาศอยู่ เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพที่ป้องกันหน้าอกควรกดลงกับหน้าอกอย่างเบบสนิท	
3. คุณสามารถปรับระดับการปั๊มน้ำนมได้โดยเลือกเครื่องหมาย MIN / MAX	

7.5 วิธีเก็บน้ำนม

น้ำนมที่ถูกปั๊มออกมาสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งได้ในเวลาจำกัด

- ควรฆ่าเชื้อโรคตัวปั๊มและขวดใส่นมก่อนใช้เสมอ
- เก็บน้ำนมที่ถูกปั๊มออกมาเข้าตู้เย็นหรือตู้แช่แข็งทันที อย่าทิ้งน้ำนมที่ปั๊มออกมาไว้ในอุณหภูมิห้อง
- หากท่านแช่น้ำนมในตู้แช่แข็งทางเราขอแนะนำให้ท่านเขียนวันที่ที่ทำการปั๊มน้ำนมไว้ขวดขวดด้วย

⚠ คำเตือน

คอยสังเกตช่วงเวลาในการเก็บผ่านตารางนี้

	อุณหภูมิห้อง	ตู้เย็น (ประมาณ 3-5°C)	ตู้แช่แข็ง (ประมาณ -16°C)
น้ำนมที่เพิ่งถูกปั๊มออกมา	เก็บได้ 6 ชม.	สามารถเก็บได้ 24 ชม. (อย่าเก็บไว้ตรงส่วนประตูเนื่องจากส่วนนั้นให้ความเย็นได้ไม่เพียงพอ)	สามารถเก็บได้ 3 เดือน
น้ำนมที่ละลายแล้ว (หลังจากถูกแช่แข็งมา)	ต้องทานทันที	10 ชม.	ห้ามนำกลับไปแช่แข็งอีก

7.6 วิธีการให้นมลูกด้วยนมแม่

ข้อสังเกต

- คุณสามารถใช้ขวดที่ให้มาพร้อมกับจุกนมซิลิโคนเมื่อให้น้ำนมด้วย คุณสามารถแสดงน้ำนมแม่ด้วยขวด NUK หรือ Avent ก่อนให้อาหาร (รวมอะแดปเตอร์ NUK / Avent ที่เกี่ยวข้องไว้ในการจัดส่ง)
- ก่อนการให้อาหารต้องแน่ใจว่าขวดนั้นถูกฆ่าเชื้อก่อนที่จะเติมด้วยน้ำนมแม่ที่เก็บไว้
 - เพื่อละลายน้ำนมแม่เก็บไว้ในตู้เย็นค้างคืนเพื่อเก็บรักษาความปลอดภัย เมื่อน้ำนมแม่ละลายน้ำแข็งแล้วจะต้องใช้ภายใน 24 ชั่วโมง น้ำนมแม่ควรละลายในน้ำอุ่นโดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วนโดยเฉพาะ
 - หากน้ำนมมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ควรทิ้งทันที
 - ห้ามอุ่นน้ำนมในไมโครเวฟเนื่องจากอาจอุ่นไม่สม่ำเสมอและอาจทำให้ลูกของคุณไหม้เมื่อดื่ม
 - หากอุ่นน้ำนมให้ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนให้นมลูก

8. ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้
เครื่องไม่ยอมปั๊ม (ดูด)	• ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนของเครื่องประกอบถูกต้อง • ตรวจสอบว่าตัวเชื่อมปั๊มน้ำนวางบนหน้าอกดีหรือยัง
น้ำนมไม่ยอมออก	• ตรวจสอบว่าท่อซิลิโคนเสียบถูกต้อง, ความแรงในการปั๊มไม่ได้ต่ำสุด, และเครื่องปั๊มถูกเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำนมเหลืออยู่ในวาล์วซิลิโคน และขีดขวางการไหลของน้ำนม
รู้สึกเจ็บจากการปั๊มน้ำนม	• พยายามผ่อนคลายแล้วค่อยลองปั๊มอีกครั้ง เมื่อใช้เครื่องปั๊มบ่อยขึ้น ท่านจะรู้สึกดีขึ้นและสบายขึ้น • ลดระดับความแรงในการปั๊ม • ปรึกษาแพทย์ของท่าน
มีน้ำนมไหลออกมาทางข้างล่างของแผ่นซิลิโคน	• ถอดแผ่นซิลิโคนและใส่เข้าไปใหม่โดยต้องแน่ใจว่าแผ่นลอนนั้นอยู่ถูกตำแหน่งและติดกับตัวเชื่อมปั๊มอย่างแน่นหนา • นั้งและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
หนึ่งในชิ้นส่วนของเครื่องปั๊มน้ำนมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย	• อย่าใช้สารละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเป็นก๊าซ • อุณหภูมิที่แปรปรวนหรือขึ้นลงเร็วเกินไปอาจทำลายพลาสติกของตัวปั๊มได้ • หากชิ้นส่วนมีความเสียหาย โปรดเลิกใช้เครื่องปั๊มน้ำนมในทันที
เครื่องปั๊มน้ำนมไม่ยอมเปิด	• ตรวจสอบว่าชิ้นส่วนของเครื่องประกอบถูกต้องและเครื่องปั๊มเปิดอยู่ • ตรวจสอบว่าปลั๊กหลักถูกเสียบอยู่กับตัวปั๊มถูกต้อง

8.1 อะไหล่และชิ้นส่วนสามใส่

ชิ้นส่วน	จำนวนรายการ
ตัวเชื่อมที่มีมีเยื่อหุ้มและวาล์วทำงานจากซิลิโคน (มาตรฐานขนาด), เมมเบรนซิลิโคน, วาล์วซิลิโคน, ซิลิโคนหลอดขวด และฝาขวด	953.15
ขวดพร้อมจุกนมและฝาขวด	163.719
อุปกรณ์แปลงไฟสำหรับขวด AVENT และ NUK	163.720
แผ่นรองที่ทำจากซิลิโคน (ขนาดเล็ก และขนาดมาตรฐาน)	163.721
ตัวเชื่อมตัวปั๊มแบบมือพร้อมแผ่นรองที่ทำมาจากซิลิโคน	163.722
ฐานรองขวดนม	163.723

9. คำแนะนำในการกำจัด

ต้องทิ้งแบตเตอรี่ที่แบนราบและวางเปล่าผ่านกล่องเก็บรวบรวมจุดรีไซเคิลที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือผู้ค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คุณต้องถูกกฎหมายเพื่อกำจัดแบตเตอรี่ รหัสด้านล่างนี้ถูกพิมพ์ลงบนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:

Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว,
Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม
Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

เพื่อเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในถังขยะในครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ทิ้งอุปกรณ์ไว้ในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในท้องถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC Directive - WEEE (อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสีย) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะ



10. ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่นสินค้า	BY70
แหล่งจ่ายไฟ	ถ่าน AAA 1.5V x 4 ก้อน
Voltage (input)	100-240 V (AC~) 50/60 Hz
Voltage (output)	6 V (DC  1.0 A
ขนาด	168 x 100 x 53 มม.
น้ำหนัก	310 กรัม (ไม่รวมถ่าน)
แรงดูดสูงสุด	0.32 บาร์
อุณหภูมิที่ทำงาน	+5°C to +40°C, 30% to 85% relative humidity (non-con densing), 700 – 1060 hPa ambient pressure
อุณหภูมิที่เก็บ	-20°C to +60°C, 10% to 95% relative humidity (non-con densing), 700 – 1060 hPa ambient pressure
อายุการใช้งานของถ่าน	500 ชั่วโมง
อุปกรณ์สำหรับการใช้งานต่อเนื่อง	เวลาเปิด 30 นาที / เวลาปิด 30 นาที
ระดับการป้องกัน	อุปกรณ์ได้รับการป้องกันสองเท่า 
ความเข้ากันได้อิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน EN 60601-1-2	
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 60601-1	
การใช้การดูแลเด็กและบทบาท - อุปกรณ์การดื่มตามมาตรฐาน EN 14350	
หน่วยการดูแลนมแม่	
ระดับอุปกรณ์ (อนวนกันความร้อนความปลอดภัย)	
อุปกรณ์ชนิด BF (หน่วยกับเกรดที่เฉพาะเจาะจงของการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า) หน่วยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในกรณีที่ไม่ขึ้นบรรยากาศที่มีออกซิโดซ์ที่ก๊าซระเบิดหรือก๊าซในดริสออกไซด์ 	

ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อุปกรณ์นี้อยู่ในระดับมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 และมีการระมัดระวังเป็นพิเศษตาม electro magnetic compatibilty (EMC) ระบบสื่อสาร HF แบบพกพาอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์นี้ หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถถามฝ่ายบริการลูกค้าหรือคู่มือการใช้ได้

11. ส่วนสำคัญ

Model no.	LXCP12 - 06
Input	100 – 240 V, 50 – 60 Hz 0.3 A max
Output	6 V DC, 1 A
ผู้ผลิต	Shenzhen LongXC Power Supply Co., LTD
	ชี้ของการเชื่อมต่อแรงไฟฟ้ากระแสตรง
	ชั้นอนวนกันความร้อน / การป้องกัน 2
ที่อยู่อาศัยและป้องกันครอบคลุม	ที่อยู่อาศัยของชิ้นส่วนหลักช่วยปกป้องผู้ใช้งานการสัมผัส (เช่นนิ้วมือ, เข็มตรวจสอบเบ็ด) อย่าสัมผัสกับผู้ป่วยและหัวต่อการส่งออกชิ้นส่วนหลัก AC / DC ในเวลาเดียวกัน

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลแมกส์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand

 line: @cservice
line: @beurerthai

 โทร. 038-314118